



NEON²
LIFESTYLE TRIFFT
PERFORMANCE



NEON²

MODERN. SMART. INDIVIDUELL.

Leicht, charakterstark und ein echter Blickfang – mit Fahrleistungen, auf die Sie nicht mehr verzichten wollen – das ist der neue Neon² (mit wegschwenkbaren Fusstützen). Der elegante, mühelos faltbare offene Rahmen passt auch in das kleinste Auto und begleitet Sie überall hin!

Sie haben Ihren eigenen Stil! Ihr Neon² auch: Gestalten Sie Ihren Neon² ganz individuell mit einer Auswahl von modernen Farben für den Rahmen, die Rückenbespannung, Räder, Lenkradgabeln und Lenkradfelgen.

→ Abgebildete Rahmenfarbe: 32 Mattschwarz

// NEUE EXO UND EXO PRO RÜCKENBESPANNUNG

Bringen Sie Farbe ins Spiel! Mit den innovativen, atmungsaktiven EXO und EXO Pro Rückenbespannungen, die in fünf verschiedenen Einfassbänder-Farben erhältlich sind.



// DAS LEBEN IST BUNT!

Genau wie der Rahmen Ihres Neon²: 32 Farben stehen für Sie zur Auswahl!




// AUFSEHENERREGEND...

... und perfekt auf Ihren Stil abstimbar: fünf Farben zur Auswahl für Lenkradfelge und Lenkradgabeln.



// DAS GANZ BESONDERE ETWAS!

Wenn Sie so richtig Farbe ins Spiel bringen möchten, ist das 24" Leichtgewichtsrads, mit farbig eloxierter Nabe und Felge, genau das Richtige.

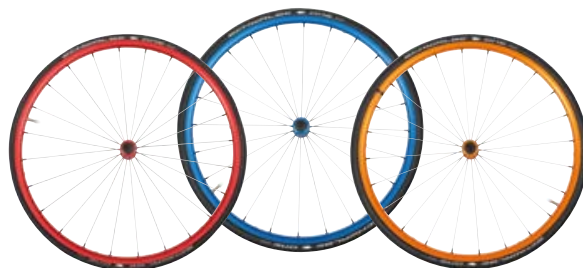

VIELSEITIGKEIT²

Das Herzstück des Neon² ist ein verstärkter, offener Rahmen. Dieser bietet das Fahrgefühl eines Starrrahmenrollstuhls, indem die innenliegenden Sitzrohre kaum Rahmenbewegungen zulassen. Die geschmiedeten Achsträger verstärken den Rahmen zusätzlich für eine verbesserte, effizientere Fahrperformance.

Das offene Rahmenende ermöglicht ein sehr kompaktes, platzsparendes Faltmass. Die wegschwenkbaren Fussstützen dienen nicht nur einfachen Transfers, sondern lassen sich auch komplett abnehmen. Gemeinsam mit dem nach vorne abklappbaren Rollstuhlrücken, ist der Neon² ein extrem platzsparendes Paket, das selbst in den kleinsten Kofferraum passt.


Die neu designten Achsträger aus geschmiedetem Aluminium sind nicht nur enorm stabil und leicht, sie bieten zusätzlich die Möglichkeit, die Sitzhöhe **3** und den Schwerpunkt **2** optimal einzustellen. Sie wollen den Rückenwinkel anpassen? Nichts leichter als das: Mit der neuen, geschmiedeten Rückenbindung können Sie den Rücken in kleinen Schritten über einen Bereich von fast 30° einstellen **1**.

→ JAY Xtreme Active Sitzkissen

Ein flaches Sitzkissen für aktive Nutzer, modular und pflegeleicht. Konzipiert für hohe Druckentlastung und gute Sitzstabilität.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.SunriseMedical.ch



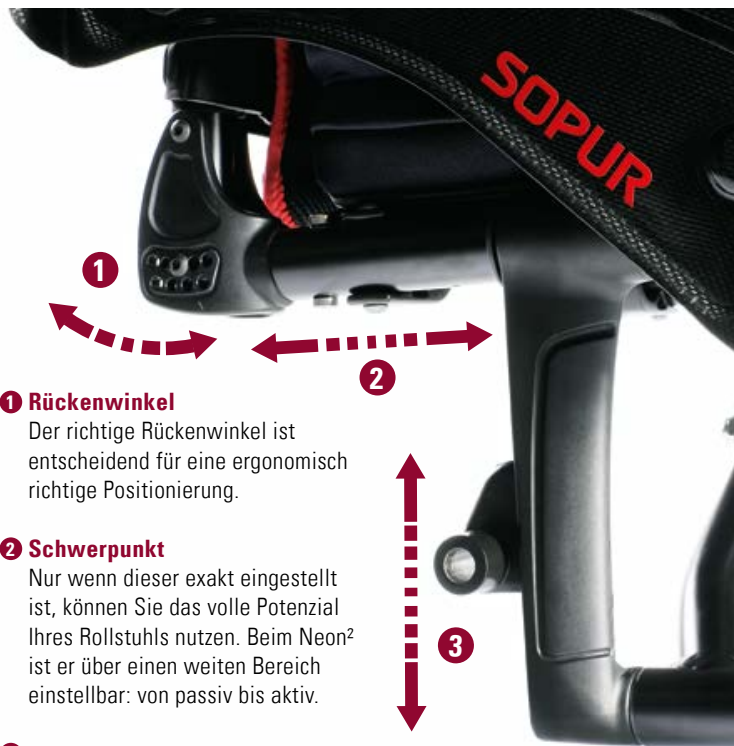

1 Rückenwinkel

Der richtige Rückenwinkel ist entscheidend für eine ergonomisch richtige Positionierung.

2 Schwerpunkt

Nur wenn dieser exakt eingestellt ist, können Sie das volle Potenzial Ihres Rollstuhls nutzen. Beim Neon² ist er über einen weiten Bereich einstellbar: von passiv bis aktiv.

3 Sitzhöhe hinten

Genau wie sie sein sollte – stellen Sie die Höhe auf Ihre individuellen Anforderungen ein.



// BESONDERS PRAKTISCH...

...sind die abschwenkbaren und abnehmbaren Fussstützen. Transfers werden so viel einfacher. Beim Transport kann das Packmass erheblich reduziert werden.



NEON²

KOMPAKTE ABMESSUNGEN
UND EINFACHE TRANSFERS.



OPTIONEN UND FUNKTIONEN DES NEON²

Konfigurieren Sie Ihren ganz persönlichen Faltrollstuhl.

Weitere Informationen zu Produktoptionen finden Sie auf dem Bestellblatt des Neon².



// EINFACH PERFEKT: EXO UND EXO PRO DIE OPTIMALE RÜCKENBESPANNUNG FÜR SIE

Komfortabel, atmungsaktiv und anpassbar – in 5 Farben erhältlich.



// SCHIEBEGRIFFE ZUR AUSWAHL

Wählen Sie Ihren Schiebegriff. Sie haben die Wahl zwischen festen, abklappbaren oder höhenverstellbaren Schiebegriffen.



// WINKELVERSTELLBARER RÜCKEN

In den Rahmen integrierte Rückenankunft aus geschmiedetem Aluminium mit einstellbaren Rückenwinkeln von 75° bis 103° in 4°-Schritten.



// EINARM-GABEL AUS ALUMINIUM

In fünf Farben – für den ganz individuellen Stil. In Kombination mit farbig eloxierten Lenkradfelgen ein echter Blickfang.



// DURCHGEHENDES FUSSBRETT AUS CARBON

Leicht und stilvoll: seitlich hochklappbares Fussbrett mit Winkel- und Tiefeneinstellung.



// SEITENTEIL AUS CARBON

Individuell gestaltetes und leichtes Seitenteil mit einzigartiger, hochwertiger Optik.



// HALBFALTENDER RÜCKEN

Für ein deutlich verringertes Packmass lässt sich die Rückenlehne nach vorne falten.



// SURGE[®] LT GREIFRINGE

Der Gripton Gummistreifen an der Oberseite des ergonomisch geformten, ovalen Greifrings sorgt für perfekten Grip.

TECHNISCHE DATEN

NEON² // FALTROLLSTUHL

Max. Nutzergewicht	140 kg	Rückenwinkel	-15° bis +13° in 4° Schritten
Rahmenversion	Verstärkter, offener Rahmen mit abschwenk- und abnehmbaren Fusstützen	Schwerpunkt	20 – 120 mm
		Antriebsräder	22" / 24" / 25" / 26"
Sitzbreite	300 – 500 mm	Radsturz	0° / 2° / 4°
Sitztiefe	340 – 500 mm	Rollstuhlgewicht	ab 11,5 kg
Vordere Sitzhöhe	350 – 570 mm	Rahmenfarben	32
Hintere Sitzhöhe	330 – 530 mm	Crashgetestet	ja
Rückenhöhe	250 – 475 mm	Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.	18.50.03.0216

Für weitere Informationen beachten Sie bitte unsere Bestellformulare oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

Technische Änderungen, Anpassungen und Druckfehler vorbehalten.



MADE IN
MALSCH/GERMANY



Sunrise Medical AG

Erlenauweg 17
3110 Münsingen
Fon: 031 958 3838
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch

